




INNOVER POUR
UN SOURIRE

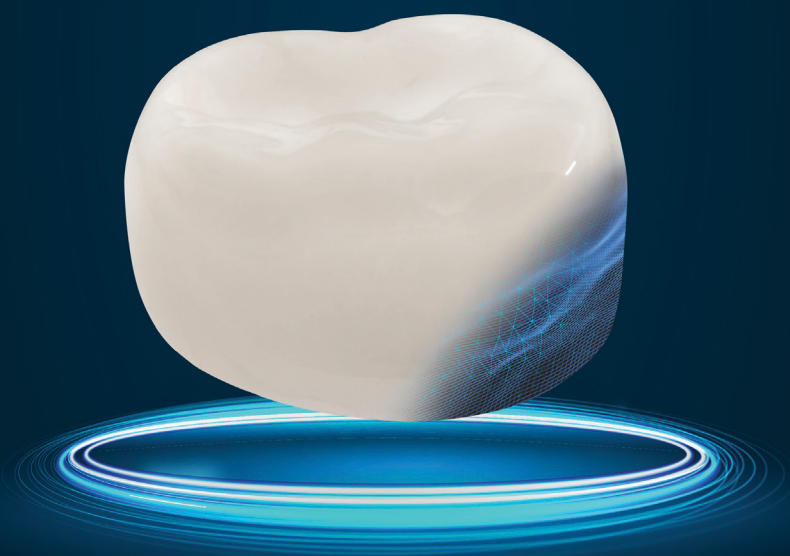

DEPUIS 1991

Sommaire

Couronnes Bioflx	2
Couronnes en zircone	6
Kits dents temporaires	8
Molaires permanentes zircone	10
Aide à la commande zircone	12
Guide de préparation dentaire pour couronne en zircone	13
Couronnes en acier inoxydable	14
Aide à la commande Acier	16
Acier NuSmile VS compétition	17
Mainteneur d'espace	18
NeoPUTTY	22
NeoMTA 2	24
Protocole NeoMTA 2	25
NuNamel SDF	26
Formations	28

The NuSmile logo is positioned on the upper right side of the page. It features the brand name 'NuSmile' in a stylized, sans-serif font, with a curved line underneath the 'i' in 'Smile'.

SOUTIENT LA PÉDODONTIE DEPUIS 35 ANS

Depuis 35 ans, NuSmile a écouté les besoins des dentistes pédiatriques et a collaboré avec eux pour proposer des solutions de restauration innovantes dans plus de 65 pays. Nous sommes profondément reconnaissants à nos clients et partenaires pour leur soutien constant, leur engagement et leur passion envers la communauté dentaire pédiatrique. Nous avons hâte de partager avec vous les innovations passionnantes à venir !

Chez NuSmile, nous tenons à exprimer toute notre gratitude envers nos clients et amis de la dentisterie pédiatrique pour leur soutien et leurs précieux retours. Ces années passées à vos côtés ont été enrichissantes, et nous sommes impatients de continuer à contribuer à l'évolution de la spécialité dans les années à venir.

**Chez NuSmile, nous ne sommes pas juste une équipe,
nous sommes une véritable famille souriante.**



Diane Krueger
PDG



Mike Loessberg
Directeur des ventes




Layne Ingram
Responsable international

LA PREMIÈRE COURONNE PÉDIATRIQUE **FLEXIBLE, DURABLE, ESTHÉTIQUE**

La technologie auto-adaptative permet à la couronne de se modifier dans les zones présentant une occlusion légèrement élevée.

Une radio-opacité d'environ 1 mm permet d'évaluer les marges de la couronne et les matériaux de coiffage pulpaire.

Marquage laser sur la surface occlusale interne pour une identification facile et une esthétique optimale

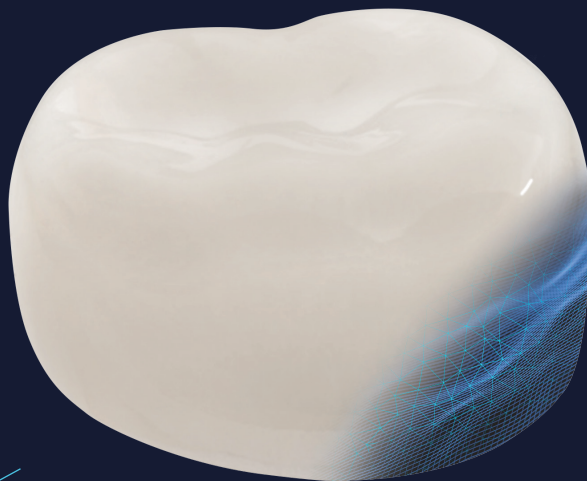

Solide et souple pour un placement facile et un ajustement précis

Surface de l'intrados imitant un microsablage pour une meilleure rétention avec les CVIMARs et verre ionomère à prise auto ou duale.

Peut être posé en exerçant une pression et coupé si nécessaire à l'aide de ciseaux à couronne.



CARACTÉRISTIQUES

NATURELLEMENT FLEXIBLE POUR UN PLACEMENT FACILE ET PRÉCIS

Couronne pédiatrique entièrement blanche, sans métal, fabriquée dans un matériau totalement biocompatible.

La préparation dentaire se situe entre une couronne en zircone et en acier inoxydable.

Les couronnes BioFlx sont préformées et préserties, ce qui réduit le temps passé au fauteuil

BioFlx n'est **PAS** recommandé pour la technique de Hall ou la technique de Hall modifiée, ni pour les patients souffrant de bruxisme ou ayant des ou ayant des parafunctions.

DURABLE


LA RÉSISTANCE À L'USURE DU BIOFLX EST SIMILAIRE OU SUPÉRIEURE À CELLE DES COURONNES ACIER.



BioFlx après **800 000 cycles** d'essais d'usure à 80 newtons



Couronne acier après **400 000 cycles** d'essais d'usure à 80 newtons

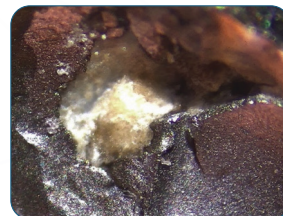

Source : données NuSmile®

CONSEILS IMPORTANTS POUR RÉUSSIR


BioFlx ne doit **JAMAIS** être le premier point de contact occlusal.




Scannez pour découvrir des conseils importants pour réussir

GUIDE DE PRÉPARATION


GUIDE DE PRÉPARATION POSTÉRIEURE

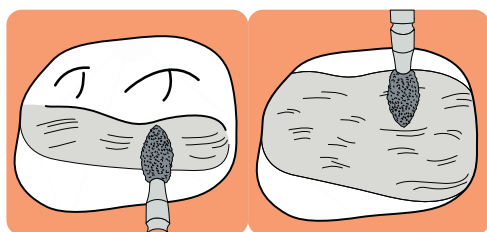

1 La réduction occlusale doit être uniforme, comprise entre 1,5 et 2 mm, et suivre les contours occlusaux naturels. Réduisez les cuspidés vestibulaires et linguales, y compris la rainure centrale et les crêtes marginales - fraise olive diamantée.

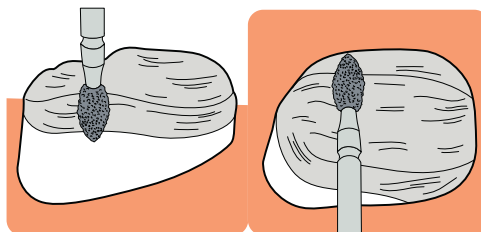

2 Réduire le tiers occlusal vestibulaire et lingual de la couronne clinique - fraise olive diamantée.

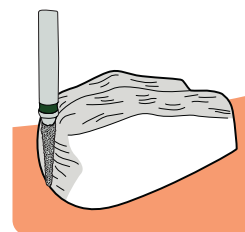


3 Rompre le contact proximal avec les dents adjacentes d'environ 1 mm, en créant un bord gingival effilé - fraise cylindrique diamantée fine.



4 Éliminer les convexités vestibulaires et les convexités linguales tout en conservant un ajustement parfait.



5 Tous les angles des lignes et des points doivent être arrondis et lissés.

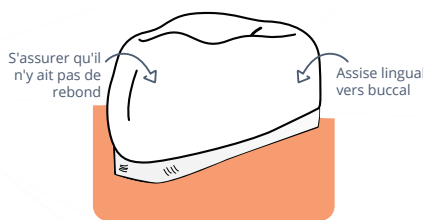

6 La couronne ne doit pas rebondir activement après avoir été complètement mise en place, et le rebord doit être placé à 0,5-1,0 mm sous la gencive. LA COURONNE BIOFLX NE DOIT JAMAIS ÊTRE LE PREMIER POINT DE CONTACT DANS L'OCCLUSION.



7 Un CVIMAR ou un verre ionomère à prise auto ou duale peuvent être utilisés pour cimenter la couronne.

ESTHÉTIQUE

UNE NOUVELLE ÈRE DANS LE DOMAINE
DES COURONNES PÉDIATRIQUES

Couronnes dentaires monochromes,
sans métal, blanches, fabriquées dans
un matériau entièrement biocompatible,
qui peuvent masquer la décoloration des
caries soignées.



Esthétique supérieure
avec marquage laser de la
surface occlusale interne

CAS BIOFLX



1 AN ET 2 MOIS
POST-OP



2 ANS ET 8 MOIS
POST-OP

RÉFÉRENCES BIOFLX

KITS POSTÉRIEURS

SP2058

Boîte de rangement pour
1^{ère} et 2^{ème} molaires primaires



PKD406L

Kit de démarrage Contient 32 couronnes étroites					
03R1N	03R2N	04R1N	05R1N	06R1N	
1	2	2	2	1	
N1D2L	N1D3L	N1D4L	N1D5L	N1D6L	
1	2	2	2	1	
03R1N	03R2N	04R1N	05R1N	06R1N	
1	2	2	2	1	
N1D2L	N1D3L	N1D4L	N1D5L	N1D6L	
1	2	2	2	1	

SKD407L

Kit de démarrage Contient 32 couronnes standard					
03R1N	03R2N	04R1N	05R1N	06R1N	
1	2	1	1	1	
N1D2L	N1D3L	N1D4L	N1D5L	N1D6L	
1	2	1	1	1	
03R1N	03R2N	04R1N	05R1N	06R1N	
1	2	1	1	1	
N1D2L	N1D3L	N1D4L	N1D5L	N1D6L	
1	2	1	1	1	

SKD406L

Recharge											
RIGHT						LEFT					
UPPER						LOWER					
EUR7406L	EUR6406L	EUR5406L	EUR4406L	EUR3406L	EUR2406L	EUR1406L	EUL7406L	EUL6406L	EUL5406L	EUL4406L	EUL3406L
E7u	E6u	E5u	E4u	E3u	E2u	E1u	E7l	E6l	E5l	E4l	E3l
DUR7406L	DUR6406L	DUR5406L	DUR4406L	DUR3406L	DUR2406L	DUR1406L	DUL7406L	DUL6406L	DUL5406L	DUL4406L	DUL3406L
D7u	D6u	D5u	D4u	D3u	D2u	D1u	D7l	D6l	D5l	D4l	D3l
DLR7406L	DLR6406L	DLR5406L	DLR4406L	DLR3406L	DLR2406L	DLR1406L	DLL7406L	DLL6406L	DLL5406L	DLL4406L	DLL3406L
L7u	L6u	L5u	L4u	L3u	L2u	L1u	L7l	L6l	L5l	L4l	L3l
ELL7406L	ELL6406L	ELL5406L	ELL4406L	ELL3406L	ELL2406L	ELL1406L	EL7406L	EL6406L	EL5406L	EL4406L	EL3406L
E7l	E6l	E5l	E4l	E3l	E2l	E1l	E7r	E6r	E5r	E4r	E3r

NuSmile BioFLX

RM41-Rev D

AU-DELÀ DE L'INNOVATION

LA PERFECTION DES COURONNES PÉDIATRIQUES



Surface de l'intrados
sablée pour une
rétenion supérieure

Esthétique reproduisant
la dent naturelle,
durable et **mise en
place facile**

Preuves scientifiques
d'une usure
comparable à celle de
l'émail.

Hautement poli
offrant une surface plus
lisse afin de réduire
l'accumulation de
plaque.

**Éviter toute
contamination** par
le sang ou la salive en
utilisant les couronnes
Try-In

Épaisseur constante
et taille uniforme des
particules pour éviter
les fractures




NuSmile® **ZR**
ZIRCONIA
Primary

! LA PULPE N'EST PAS PLATE !

Les couronnes postérieures NuSmile ZR ont une anatomie occlusale uniforme et fine qui suit les contours de la surface occlusale de la dent naturelle, ce qui réduit le risque d'exposition pulpaire par rapport à la conception "Flat-fit" de certaines autres couronnes. Les marques concurrentes de couronnes postérieures en zirconie avec un design occlusal "Flat-fit" ont été sujettes à des échecs de cas probablement dus à des expositions pulpaires iatrogènes.


POURQUOI S'Y RISQUER ?

NuSmile
CONTOUR-FIT

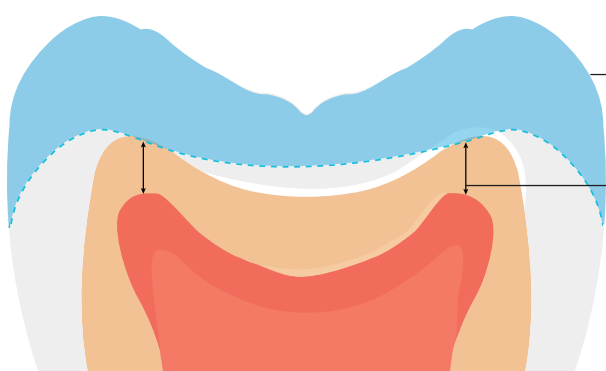

- **Moins de risques d'exposition** pulpaire grâce aux contours naturels de la couronne ZR de NuSmile
- **Moins de taille dentaire nécessaire.** Réduction totale de 1 à 1,5 mm en suivant les contours naturels de l'occlusion.

Autres marques
FLAT-FIT

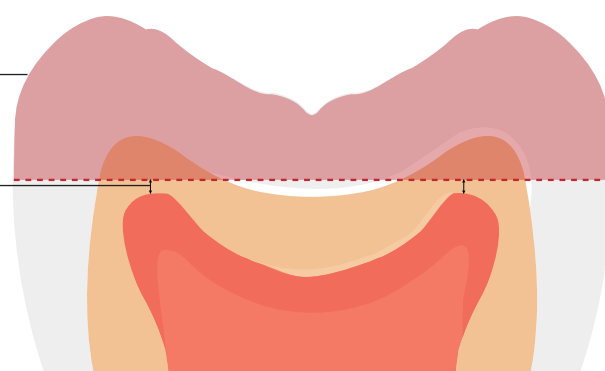


- **Peut être sujet à des échecs** dus à l'exposition iatrogène de la pulpe.
- **Une taille plus importante des dents est nécessaire**

ÉPAISSEUR MINIMALE RÉSISTANCE MAXIMALE

NUSMILE ZR


SURFACE OCCLUSALE
PLUS FINE

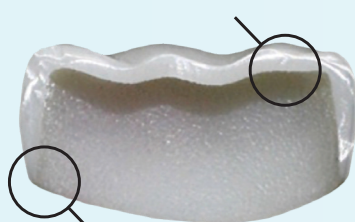

0,2mm de marge


SPRIG

SURFACE OCCLUSAL
PLUS ÉPAISSE

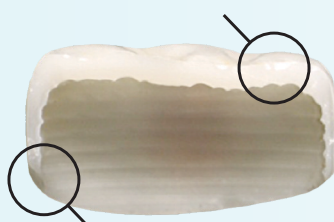

0,5mm de marge

RÉSISTANCE À
LA FRACTURE
2X PLUS
ÉLEVÉE

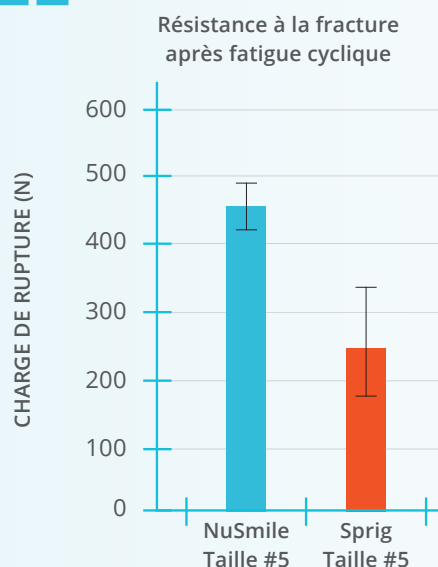



Légende

UR (Supérieur droit)	UL (Supérieur gauche)
LR (Inférieur droit)	LL (Inférieur gauche)

KITS DENTS TEMPORAIRES EN ZIRCON



INCISIVE CENTRALE / LATÉRALE

Kit d'évaluation Contient 16 couronnes						
A1R	A2R	A3R				
1	2	1				
A1L	A2L	A3L				
1	2	1				
	B2R	B3R	B4R			
	1	2	1			
	B2L	B3L	B4L			
	1	2	1			

EK204L

Kit de démarrage Contient 40 couronnes						
A1R	A2R	A3R	A4R	A5R		
2	2	2	2	2		
A1L	A2L	A3L	A4L	A5L		
2	2	2	2	2		
B1R	B2R	B3R	B4R	B5R		
2	2	2	2	2		
B1L	B2L	B3L	B4L	B5L		
2	2	2	2	2		

SK204L

Kit professionnel Contient 84 couronnes						
A0R	A1R	A2R	A3R	A4R	A5R	A6R
1	4	4	4	4	1	1
A0L	A1L	A2L	A3L	A4L	A5L	A6L
1	4	4	4	4	1	1
B0R	B1R	B2R	B3R	B4R	B5R	B6R
1	1	4	4	4	4	1
B0L	B1L	B2L	B3L	B4L	B5L	B6L
1	1	4	4	4	4	1
U1		U2		U3		U4
2		2		2		2

PK204L

CANINE

Kit d'évaluation Contient 16 couronnes						
C0R	C1R	C2R				
1	2	1				
C0L	C1L	C2L				
1	2	1				
	C1R	C2R	C3R			
	1	2	1			
	C1L	C2L	C3L			
	1	2	1			

EKC204L

Kit de démarrage Contient 40 couronnes						
C0R	C1R	C2R	C3R	C4R		
2	2	2	2	2		
C0L	C1L	C2L	C3L	C4L		
2	2	2	2	2		
C0R	C1R	C2R	C3R	C4R		
2	2	2	2	2		
C0L	C1L	C2L	C3L	C4L		
2	2	2	2	2		

SKC204L

Kit professionnel Contient 84 couronnes						
C0R	C1R	C2R	C3R	C4R	C5R	C6R
4	4	4	4	2	2	1
C0L	C1L	C2L	C3L	C4L	C5L	C6L
4	4	4	4	2	2	1
C0R	C1R	C2R	C3R	C4R	C5R	C6R
4	4	4	4	2	2	1
C0L	C1L	C2L	C3L	C4L	C5L	C6L
4	4	4	4	2	2	1

PKC204L

1^{ERE} ET 2^{ÈME} MOLAIRES PRIMAIRES - NORMAL OU ÉTROITE

Kit d'évaluation Contient 16 couronnes						
	D/E3R	D/E4R	D/E5R			
	1	2	1			
	D/E3L	D/E4L	D/E5L			
	1	2	1			
	D/E3R	D/E4R	D/E5R			
	1	2	1			
	D/E3L	D/E4L	D/E5L			
	1	2	1			

1^{ère} molaire normal
1^{ère} molaire étroite
2^{ème} molaire normal
2^{ème} molaire étroite

EKD206L
EKD207L
EKE206L
EKE207L

Kit de démarrage Contient 40 couronnes						
	D/E2R	D/E3R	D/E4R	D/E5R	D/E6R	
	2	2	2	2	2	
	D/E2L	D/E3L	D/E4L	D/E5L	D/E6L	
	2	2	2	2	2	
	D/E2R	D/E3R	D/E4R	D/E5R	D/E6R	
	2	2	2	2	2	
	D/E2L	D/E3L	D/E4L	D/E5L	D/E6L	
	2	2	2	2	2	

SKD206L
SKD207L
SKE206L
SKE207L

Kit professionnel Contient 84 couronnes						
	D/E1R	D/E2R	D/E3R	D/E4R	D/E5R	D/E6R
	2	4	4	4	4	2
	D/E1L	D/E2L	D/E3L	D/E4L	D/E5L	D/E6L
	2	4	4	4	4	2
	D/E1R	D/E2R	D/E3R	D/E4R	D/E5R	D/E6R
	2	4	4	4	4	2
	D/E1L	D/E2L	D/E3L	D/E4L	D/E5L	D/E6L
	2	4	4	4	4	2

PKD206L
PKD207L
PKE206L
PKE207L

POUR UN SOURIRE DE HAUT NIVEAU. TOUTES LES COURONNES DONT VOUS AVEZ BESOIN

KIT DENTS TEMPORAIRES ANTÉRIEURES

Contient 56 couronnes

CENTRALE / LATÉRALE

CANINES



MKA204L

Kit de démarrage 40 couronnes					
A1R	A2R	A3R	A4R	A5R	
2	2	2	2	2	
A1L	A2L	A3L	A4L	A5L	
2	2	2	2	2	
B1R	B2R	B3R	B4R	B5R	
2	2	2	2	2	
B1L	B2L	B3L	B4L	B5L	
2	2	2	2	2	

SK204L

Kit d'évaluation 16 couronnes					
COR	C1R	C2R			
1	2	1			
COL	C1L	C2L			
1	2	1			
	C1R	C2R	C3R		
	1	2	1		
	C1L	C2L	C3L		
	1	2	1		

EKC204L

KIT DENTS TEMPORAIRES POSTÉRIEURES

Contient 80 couronnes

1^{ERE} MOLAIRE ÉTROITE

2^{EME} MOLAIRE NORMALE



MKPC206L

Kit de démarrage 40 couronnes					
D2R N	D3R N	D4R N	D5R N	D6R N	
2	2	2	2	2	
N D2L	N D3L	N D4L	N D5L	N D6L	
2	2	2	2	2	
D2R N	D3R N	D4R N	D5R N	D6R N	
2	2	2	2	2	
N D2L	N D3L	N D4L	N D5L	N D6L	
2	2	2	2	2	

SKD207L

Kit de démarrage 40 couronnes					
E2R	E3R	E4R	E5R	E6R	
2	2	2	2	2	
E2L	E3L	E4L	E5L	E6L	
2	2	2	2	2	
E2R	E3R	E4R	E5R	E6R	
2	2	2	2	2	
E2L	E3L	E4L	E5L	E6L	
2	2	2	2	2	

SKD206L

KIT PRIMAIRE ÉTROIT POSTÉRIEUR ZR

Contient 80 couronnes

1^{ERE} MOLAIRE ÉTROITE

2^{EME} MOLAIRE ÉTROITE



MKPN207L

Kit de démarrage 40 couronnes					
D2R N	D3R N	D4R N	D5R N	D6R N	
2	2	2	2	2	
N D2L	N D3L	N D4L	N D5L	N D6L	
2	2	2	2	2	
D2R N	D3R N	D4R N	D5R N	D6R N	
2	2	2	2	2	
N D2L	N D3L	N D4L	N D5L	N D6L	
2	2	2	2	2	

SKD207L

Kit de démarrage 40 couronnes					
E2R N	E3R N	E4R N	E5R N	E6R N	
2	2	2	2	2	
N E2L	N E3L	N E4L	N E5L	N E6L	
2	2	2	2	2	
E2R N	E3R N	E4R N	E5R N	E6R N	
2	2	2	2	2	
N E2L	N E3L	N E4L	N E5L	N E6L	
2	2	2	2	2	

SKE207L

Les kits ZR comprennent les couronnes d'essai "Try-In" correspondantes

MOLAIRES PERMANENTES

PLUS BEAU

EN BLANC

Plus courtes et plus
larges que les SSC
traditionnelles

Une nouvelle solution pour
lutter contre les caries
dentaires de la petite
enfance et de l'adolescence
et la MIH

Bénéficiant de plus de
6 ans de succès clinique

Supérieure en termes
d'esthétique, de solidité,
de résistance à la fracture
et à l'usure

Les couronnes molaires
permanentes ZR résistent à
une compression maximale
de mastication à tout âge

Facile à utiliser
Peu de préparation





ZR MOLAIRE PERMANENTE - TEINTE A2

Kit d'évaluation Contient 16 couronnes					
	4R	5R	6R		
	1	2	1		
	4L	5L	6L		
	1	2	1		
	4R	5R	6R		
	1	2	1		
	4L	5L	6L		
	1	2	1		

EK250A2

Kit de démarrage Contient 40 couronnes					
2R	3R	4R	5R	6R	7R
1	2	2	2	2	1
2L	3L	4L	5L	6L	7L
1	2	2	2	2	1
2R	3R	4R	5R	6R	7R
1	2	2	2	2	1
2L	3L	4L	5L	6L	7L
1	2	2	2	2	1

SK250A2

Kit professionnel Contient 84 couronnes					
2R	3R	4R	5R	6R	7R
3	3	4	4	4	3
2L	3L	4L	5L	6L	7L
3	3	4	4	4	3
2R	3R	4R	5R	6R	7R
3	3	4	4	4	3
2L	3L	4L	5L	6L	7L
3	3	4	4	4	3

PK250A2

Cas du Dr. Paul Bahn



PRE-OP



3 ANS POST-OP



6 ANS POST-OP



“ Je travaille avec ces couronnes permanentes NuSmile depuis plus de six ans et elles ont dépassé mes attentes. ”

Paul Bahn, DMD | Directeur de programme à l'Université de Temple, USA

CODE DE COMMANDE DE COURONNES INDIVIDUELLES ZIRCON (PAR 2)

CENTRALE et LATÉRALE

	Taille 0	1	2	3	4	5	6
N° dent	A0R	A1R	A2R	A3R	A4R	A5R	A6R
51	A0R204L	A1R204L	A2R204L	A3R204L	A4R204L	A5R204L	A6R204L
61	A0L	A1L	A2L	A3L	A4L	A5L	A6L
	A0L204L	A1L204L	A2L204L	A3L204L	A4L204L	A5L204L	A6L204L
52	B0R	B1R	B2R	B3R	B4R	B5R	B6R
	B0R204L	B1R204L	B2R204L	B3R204L	B4R204L	B5R204L	B6R204L
62	B0L	B1L	B2L	B3L	B4L	B5L	B6L
	B0L204L	B1L204L	B2L204L	B3L204L	B4L204L	B5L204L	B6L204L
72, 71, 81, 82	U1	U2	U3	U4			
	U1204L	U2204L	U3204L	U4204L			

CANINE

	Taille 0	1	2	3	4	5	6
N° dent	C0R	C1R	C2R	C3R	C4R	C5R	C6R
53	C0R204L	C1R204L	C2R204L	C3R204L	C4R204L	C5R204L	C6R204L
63	C0L	C1L	C2L	C3L	C4L	C5L	C6L
	C0L204L	C1L204L	C2L204L	C3L204L	C4L204L	C5L204L	C6L204L
83	C0R	C1R	C2R	C3R	C4R	C5R	C6R
	LC0R204L	LC1R204L	LC2R204L	LC3R204L	LC4R204L	LC5R204L	LC6R204L
73	C0L	C1L	C2L	C3L	C4L	C5L	C6L
	LC0L204L	LC1L204L	LC2L204L	LC3L204L	LC4L204L	LC5L204L	LC6L204L

1ère MOLAIRE NORMALE

	Taille 1	2	3	4	5	6	7
N° dent	D1R	D2R	D3R	D4R	D5R	D6R	D7R
54	DUR1206L	DUR2206L	DUR3206L	DUR4206L	DUR5206L	DUR6206L	DUR7206L
64	D1L	D2L	D3L	D4L	D5L	D6L	D7L
	DUL1206L	DUL2206L	DUL3206L	DUL4206L	DUL5206L	DUL6206L	DUL7206L
84	D1R	D2R	D3R	D4R	D5R	D6R	D7R
	DLR1206L	DLR2206L	DLR3206L	DLR4206L	DLR5206L	DLR6206L	DLR7206L
74	D1L	D2L	D3L	D4L	D5L	D6L	D7L
	DLL1206L	DLL2206L	DLL3206L	DLL4206L	DLL5206L	DLL6206L	DLL7206L

1ère MOLAIRE ÉTROITE

	Taille 1	2	3	4	5	6	7
N° dent	D1R	D2R	D3R	D4R	D5R	D6R	D7R
54	DUR1207L	DUR2207L	DUR3207L	DUR4207L	DUR5207L	DUR6207L	DUR7207L
64	D1L	D2L	D3L	D4L	D5L	D6L	D7L
	DUL1207L	DUL2207L	DUL3207L	DUL4207L	DUL5207L	DUL6207L	DUL7207L
84	D1R	D2R	D3R	D4R	D5R	D6R	D7R
	DLR1207L	DLR2207L	DLR3207L	DLR4207L	DLR5207L	DLR6207L	DLR7207L
74	D1L	D2L	D3L	D4L	D5L	D6L	D7L
	DLL1207L	DLL2207L	DLL3207L	DLL4207L	DLL5207L	DLL6207L	DLL7207L

2ème MOLAIRE NORMALE

	Taille 1	2	3	4	5	6	7
N° dent	E1R	E2R	E3R	E4R	E5R	E6R	E7R
55	EUR1206L	EUR2206L	EUR3206L	EUR4206L	EUR5206L	EUR6206L	EUR7206L
65	E1L	E2L	E3L	E4L	E5L	E6L	E7L
	EUL1206L	EUL2206L	EUL3206L	EUL4206L	EUL5206L	EUL6206L	EUL7206L
85	E1R	E2R	E3R	E4R	E5R	E6R	E7R
	ELR1206L	ELR2206L	ELR3206L	ELR4206L	ELR5206L	ELR6206L	ELR7206L
75	E1L	E2L	E3L	E4L	E5L	E6L	E7L
	ELL1206L	ELL2206L	ELL3206L	ELL4206L	ELL5206L	ELL6206L	ELL7206L

2ème MOLAIRE ÉTROITE

	Taille 1	2	3	4	5	6	7
N° dent	E1R	E2R	E3R	E4R	E5R	E6R	E7R
55	EUR1207L	EUR2207L	EUR3207L	EUR4207L	EUR5207L	EUR6207L	EUR7207L
65	E1L	E2L	E3L	E4L	E5L	E6L	E7L
	EUL1207L	EUL2207L	EUL3207L	EUL4207L	EUL5207L	EUL6207L	EUL7207L
85	E1R	E2R	E3R	E4R	E5R	E6R	E7R
	ELR1207L	ELR2207L	ELR3207L	ELR4207L	ELR5207L	ELR6207L	ELR7207L
75	E1L	E2L	E3L	E4L	E5L	E6L	E7L
	ELL1207L	ELL2207L	ELL3207L	ELL4207L	ELL5207L	ELL6207L	ELL7207L

MOLAIRE PERMANENTE

	Taille 2	3	4	5	6	7
N° dent	2R	3R	4R	5R	6R	7R
16	Y6UR2250A2	Y6UR3250A2	Y6UR4250A2	Y6UR5250A2	Y6UR6250A2	Y6UR7250A2
26	2L	3L	4L	5L	6L	7L
	Y6UL2250A2	Y6UL3250A2	Y6UL4250A2	Y6UL5250A2	Y6UL6250A2	Y6UL7250A2
46	2R	3R	4R	5R	6R	7R
	Y6LR2250A2	Y6LR3250A2	Y6LR4250A2	Y6LR5250A2	Y6LR6250A2	Y6LR7250A2
36	2L	3L	4L	5L	6L	7L
	Y6LL2250A2	Y6LL3250A2	Y6LL4250A2	Y6LL5250A2	Y6LL6250A2	Y6LL7250A2

UR
(Maxillaire droite)

UL
(Maxillaire gauche)

LR
(Mandibulaire droite)

LL
(Mandibulaire gauche)




Scannez pour télécharger votre bon de commande

GUIDE DE PRÉPARATION

Préparation beaucoup moins invasive que les autres marques*.


NuSmile ZR ZIRCONIA Antérieur

Étape 1

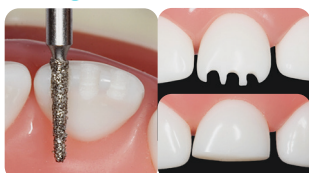

Rainures incisales profondes (environ 1mm.)
- Fraise diamantée bague noire

Étape 2

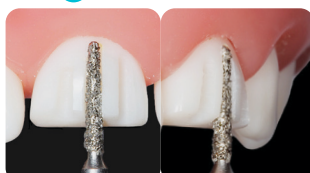

Rainures faciales (0,5 mm.) - Fraise diamantée bague noire

Étape 3




Taille des faces interproximales (environ 1 mm.)
- Fraise diamantée bague noire

Étape 4



Nivelier et arrondir les angles des rainures faciales et interproximales

Étape 5

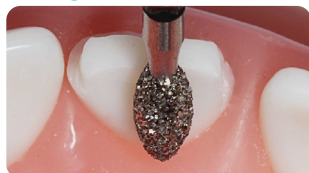


Tailler le cingulum jusqu'à la face incisale - Fraise olive diamantée

Étape 6



Tester l'adaptation jusqu'à l'épaulement du niveau gingival

Étape 7

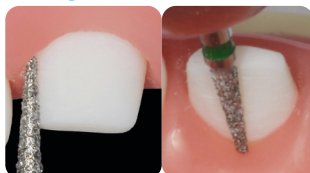

Tailler l'épaulement et étendre la préparation jusqu'au niveau sous-gingival de la dent - Fraise diamantée bague verte


Étape 8



Essai final d'ajustement
Lorsque plusieurs dents sont restaurées, essayez toutes les couronnes ensemble pour qu'elles se placent passivement. Si la couronne ne s'insère pas passivement, affiner la préparation de la dent pour qu'elle s'adapte à la couronne.


NuSmile ZR ZIRCONIA Postérieur

Étape 1

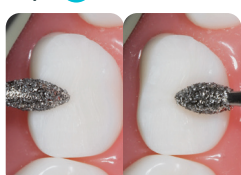


Tailler les cuspidés jusqu'au niveau du sillon central en conservant les inclinaison des cuspidés - Fraise olive diamantée

Étape 2

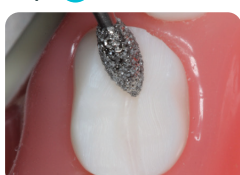


Tailler le sillon central (environ 0,5 mm.) - Fraise olive diamantée

Étape 3

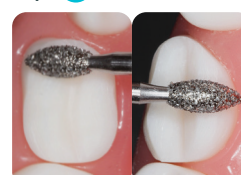


Tailler le tiers de la face occlusale et linguale - Fraise olive diamantée

Étape 4

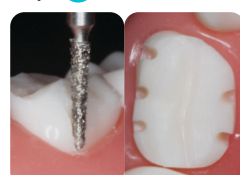


Rainures profondes des faces vestibulaires et linguales (environ 0,5 mm.) - Fraise diamantée bague noire

Étape 5

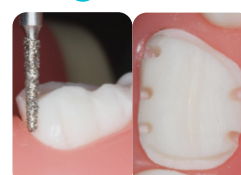


Taille des faces interproximales (environ 1 mm.) - Fraise diamantée bague noire

Étape 6

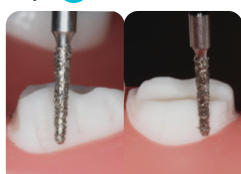


Nivelier et arrondir les angles des rainures des faces interproximales, occlusale et linguale

Étape 7

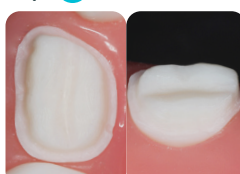


Épaulement créé au niveau gingival

Étape 8

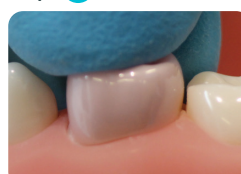


Test d'ajustement avec la couronne Try-in

Étape 9

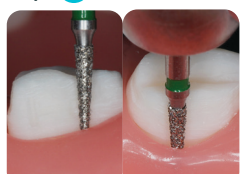

Tailler l'épaulement et étendre la préparation jusqu'au niveau sous-gingival de la dent - Fraise diamantée bague verte

Étape 10

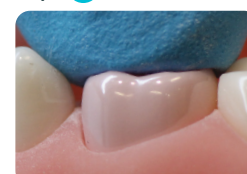

Essai final d'ajustement
Lorsque plusieurs dents sont restaurées, essayez toutes les couronnes ensemble pour qu'elles se placent passivement. Si la couronne ne s'insère pas passivement, affiner la préparation de la dent pour qu'elle s'adapte à la couronne.

*Wilson, C., Versluis, A., Tantbirojn, D., & Wells, M. (2021). Pilot Study of Tooth Structure. Removed in Primary Molar Zirconia Crown Preparations of Typodont Teeth. Recent Progress in Materials, 03(02), 1-1. doi:10.21926/rpm.2102020

COURONNES EN ACIER INOXYDABLE
316L DE QUALITÉ CHIRURGICALE

UNE MEILLEURE QUALITÉ À UN MEILLEUR PRIX

Même acier inoxydable 316L de qualité chirurgicale que celui utilisé pour les implants orthopédiques soumis à de fortes contraintes. Résistant à la corrosion, hautement poli et biocompatible.

Un contour optimisé et une hauteur plus courte permettent de réduire le temps passé au fauteuil et d'améliorer la productivité du cabinet.

La gravure au laser est indélébile et facile à lire. Résiste à l'autoclavage et contribue à éliminer les erreurs.



Une grande microdureté, une résistance à la compression et une résistance à la fatigue élevées permettent de réduire l'usure et les taux de défaillance²

Une table occlusale plus large, une anatomie cuspidienne mieux définie permettent une mastication plus fonctionnelle.

Meilleure qualité d'ajustement en routine. Les couronnes en acier inoxydable NuSmile sont solides, faciles à tailler et à sertir si nécessaire.

² Bamdadian, Z., Pasdar, N., Alhavaz, A., Ghasemi, S., & Bijani, A. (2019). Comparative Evaluation of Physical and Mechanical Properties of Different Brands of Primary Molar Stainless-Steel Crowns: An In Vitro Study. Open access Macedonian journal of medical sciences, 7(23), 4120-4126. <https://doi.org/10.3889/oamjms.2019.861>



POSTÉRIEUR

Kit d'évaluation Contient 24 couronnes					
	DUR3	DUR4	DUR5		
	1	1	1		
	DUL3	DUL4	DUL5		
	1	1	1		
	DLR3	DLR4	DLR5		
	1	1	1		
	DLL3	DLL4	DLL5		
	1	1	1		
	EUR3	EUR4	EUR5		
	1	1	1		
	EUL3	EUL4	EUL5		
	1	1	1		
	ELR3	ELR4	ELR5		
	1	1	1		
	ELL3	ELL4	ELL5		
	1	1	1		

EK606

Kit de démarrage Contient 120 couronnes					
	DUR3	DUR4	DUR5		
	5	5	5		
	DUL3	DUL4	DUL5		
	5	5	5		
	DLR3	DLR4	DLR5		
	5	5	5		
	DLL3	DLL4	DLL5		
	5	5	5		
	EUR3	EUR4	EUR5		
	5	5	5		
	EUL3	EUL4	EUL5		
	5	5	5		
	ELR3	ELR4	ELR5		
	5	5	5		
	ELL3	ELL4	ELL5		
	5	5	5		

SK606

Kit professionnel Contient 240 couronnes					
DUR2	DUR3	DUR4	DUR5	DUR6	DUR7
5	5	5	5	5	5
DUL2	DUL3	DUL4	DUL5	DUL6	DUL7
5	5	5	5	5	5
DLR2	DLR3	DLR4	DLR5	DLR6	DLR7
5	5	5	5	5	5
DLL2	DLL3	DLL4	DLL5	DLL6	DLL7
5	5	5	5	5	5
EUR2	EUR3	EUR4	EUR5	EUR6	EUR7
5	5	5	5	5	5
EUL2	EUL3	EUL4	EUL5	EUL6	EUL7
5	5	5	5	5	5
ELR2	ELR3	ELR4	ELR5	ELR6	ELR7
5	5	5	5	5	5
ELL2	ELL3	ELL4	ELL5	ELL6	ELL7
5	5	5	5	5	5

PK606

CANINES

Kit d'évaluation Contient 24 couronnes					
C1	C2	C3	C4	C5	C6
2	2	2	2	2	2
LC1	LC2	LC3	LC4	LC5	LC6
2	2	2	2	2	2

EKC604

Kit de démarrage Contient 120 couronnes					
C1	C2	C3	C4	C5	C6
10	10	10	10	10	10
LC1	LC2	LC3	LC4	LC5	LC6
10	10	10	10	10	10

SKC604

Kit professionnel Contient 240 couronnes					
C1	C2	C3	C4	C5	C6
20	20	20	20	20	20
LC1	LC2	LC3	LC4	LC5	LC6
20	20	20	20	20	20

PKC604

KIT DENTS TEMPORAIRES EN ACIER INOXYDABLE

Contient 264 couronnes

MKSS600

POSTÉRIEUR

Kit professionnel Contient 240 couronnes											
DUR2	DUR3	DUR4	DUR5	DUR6	DUR7	EUR2	EUR3	EUR4	EUR5	EUR6	EUR7
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
DUL2	DUL3	DUL4	DUL5	DUL6	DUL7	EUL2	EUL3	EUL4	EUL5	EUL6	EUL7
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
DLR2	DLR3	DLR4	DLR5	DLR6	DLR7	ELR2	ELR3	ELR4	ELR5	ELR6	ELR7
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
DLL2	DLL3	DLL4	DLL5	DLL6	DLL7	ELL2	ELL3	ELL4	ELL5	ELL6	ELL7
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

PK606


CANINES

Kit d'évaluation Contient 24 couronnes					
C1	C2	C3	C4	C5	C6
2	2	2	2	2	2
LC1	LC2	LC3	LC4	LC5	LC6
2	2	2	2	2	2

EKC604


CODE DE COMMANDE DE COURONNES INDIVIDUELLES ACIER (PAR 5)

		CANINE											
		Taille	1	2	3	4	5	6					
N° dent													
53/63		C1		C2		C3		C4		C5		C6	
			C1604		C2604		C3604		C4604		C5604		C6604
83/73		LC1		LC2		LC3		LC4		LC5		LC6	
			LC1604		LC2604		LC3604		LC4604		LC5604		LC6604

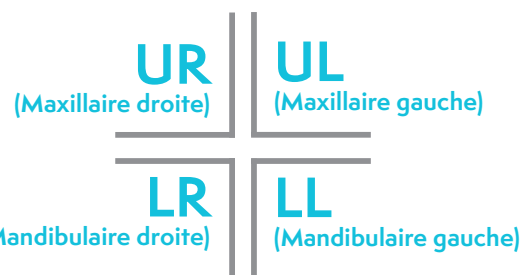

		1 ^{ère} MOLAIRE					
Taille		2	3	4	5	6	7
N° dent		DUR2 DUR2606	DUR3 DUR3606	DUR4 DUR4606	DUR5 DUR5606	DUR6 DUR6606	DUR7 DUR7606
54							
64		DUL2 DUL2606	DUL3 DUL3606	DUL4 DUL4606	DUL5 DUL5606	DUL6 DUL6606	DUL7 DUL7606
84		DLR2 DLR2606	DLR3 DLR3606	DLR4 DLR4606	DLR5 DLR5606	DLR6 DLR6606	DLR7 DLR7606
74		DLL2 DLL2606	DLL3 DLL3606	DLL4 DLL4606	DLL5 DLL5606	DLL6 DLL6606	DLL7 DLL7606

		2 ^{ème} MOLAIRE											
Taille		2	3	4	5	6	7						
N° dent		EUR2	EUR3	EUR4	EUR5	EUR6	EUR7						
55		EUR2606	EUR3606	EUR4606	EUR5606	EUR6606	EUR7606						
65		EUL2 EUL2606	EUL3 EUL3606	EUL4 EUL4606	EUL5 EUL5606	EUL6 EUL6606	EUL7 EUL7606						
85		ELR2 ELR2606	ELR3 ELR3606	ELR4 ELR4606	ELR5 ELR5606	ELR6 ELR6606	ELR7 ELR7606						
75		ELL2 ELL2606	ELL3 ELL3606	ELL4 ELL4606	ELL5 ELL5606	ELL6 ELL6606	ELL7 ELL7606						

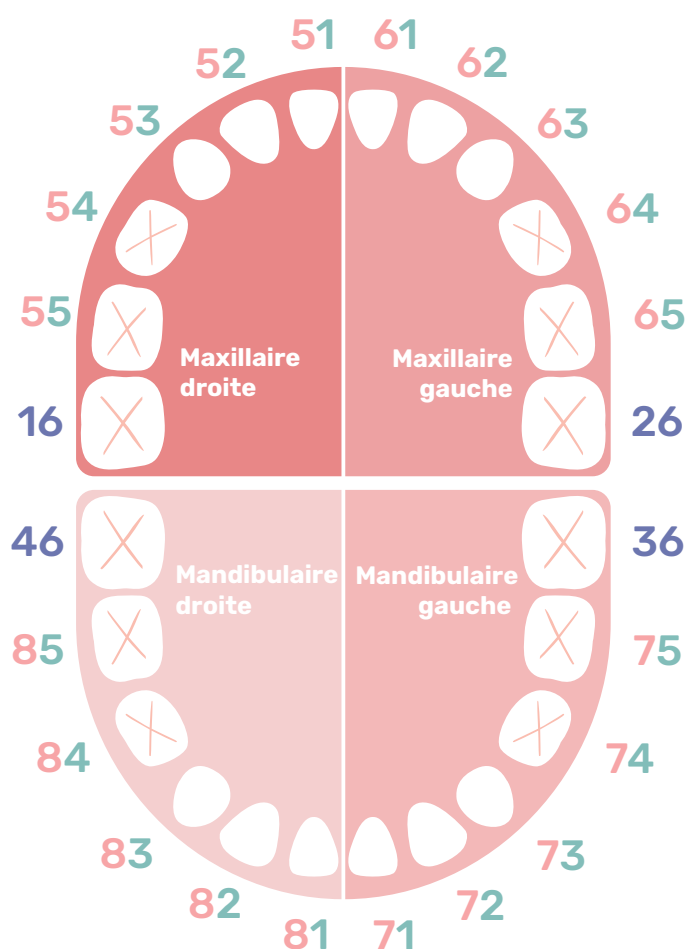

- 5 Maxillaire droite
- 6 Maxillaire gauche
- 7 Mandibulaire droite
- 8 Mandibulaire gauche

- 1 Incisive centrale
- 2 Incisive latérale
- 3 Canine
- 4 Première molaire
- 5 Deuxième molaire

16 26 46 36 Molaire permanente

Scannez pour télécharger votre bon de commande



ACIER 316L
DE QUALITÉ
CHIRURGICALE



VS

LES COURONNES
TRADITIONNELLES SONT
FABRIQUÉES À PARTIR
D'ACIER DE QUALITÉ
ALIMENTAIRE



AVANTAGES

- Fabriqué en acier inoxydable 316L de qualité chirurgicale afin de mieux résister à l'usure.
- Forme idéale pour faciliter l'ajustage cervical par découpe et bouterollage des couronnes en cas de besoin.
- Biocompatible et hautement poli pour réduire l'accumulation de plaque
- Anatomie fonctionnelle et précise
- Moins de coupe ou de sertissage comparé aux autres marques
- Meilleure adaptation
- Durabilité et facilité d'utilisation
- La gravure au laser réduit les erreurs et permet de gagner du temps



“ Les SSC de NuSmile sont en acier inoxydable de qualité chirurgicale supérieure qui est flexible pour faciliter la mise en place tout en résistant à l'usure due au bruxisme. J'apprécie également les tailles gravées au laser sur la surface linguale, marquées d'un code clair à quatre chiffres. Les SSC de NuSmile sont mon premier choix ! ”

Jeanette MacLean, DDS

Mainteneur d'espace universel

REPENSÉ POUR VOUS

Une qualité supérieure à
un coût inférieur à celui des
autres marques

50 % de stock en moins grâce à une
conception de bande universelle dans
une gamme complète de tailles allant
du 23 au 42 avec des demi-tailles.

Tube plus court pour réduire le
temps passé à couper et à ajuster




Trois options de boucle
standard pour couvrir tous les
cas cliniques

Le diamètre du tube et de la
boucle est légèrement ajusté
afin de minimiser les risques
de déplacement et de rupture.

La bande universelle s'adapte
facilement à l'anatomie
des dents maxillaires et
mandibulaires.

NEW

Les boucles comportent
désormais des repères
de 1 mm pour une
coupe facile et précise.

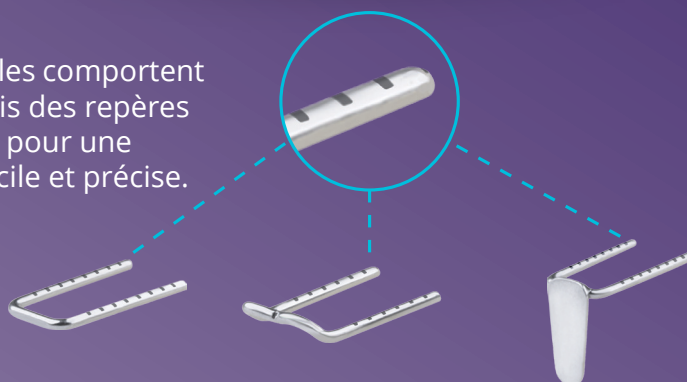

DESIGN UNIVERSEL

= LA MOITIÉ DU STOCK

$\frac{1}{2}$

Bande conçue pour l'anatomie dentaire maxillaire et mandibulaire, réduit de moitié les stocks



Disponible dans une gamme complète de tailles : 23 à 42 avec demi-tailles



Processus de commande plus simple



Bracelet en acier inoxydable 304L solide et trempé pour être plus malléable

CONCEPTION DE TUBE PLUS COURT ÉCONOMISE UN TEMPS PRÉCIEUX

Aucun découpage ni nettoyage des débris métalliques n'est nécessaire, ce qui vous permet de gagner du temps.

Diamètre du tube et de la boucle légèrement ajusté pour minimiser le risque de déplacement et de rupture.


NuSmile **vs.** Autres marques



FORT

SOUDAGE AU LASER

Soudé au laser pour une solidité et durabilité accrue

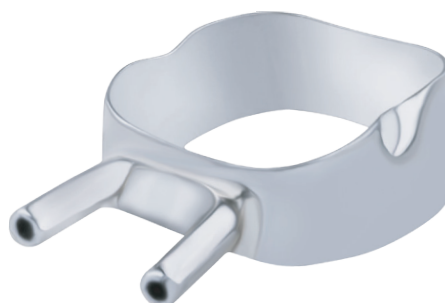


LARGEUR UNIQUE DES BOUCLES

NuSmile vs. Autres marques

Les boucles sont disponibles en une seule largeur, ce qui réduit les stocks.

Courbure et hauteur optimales pour réduire le glissement et le conflit avec les tissus sur les canines primaires ou permanentes


La boucle incurvée peut être placée distalement en direction gingivale afin de guider l'éruption d'une molaire permanente.

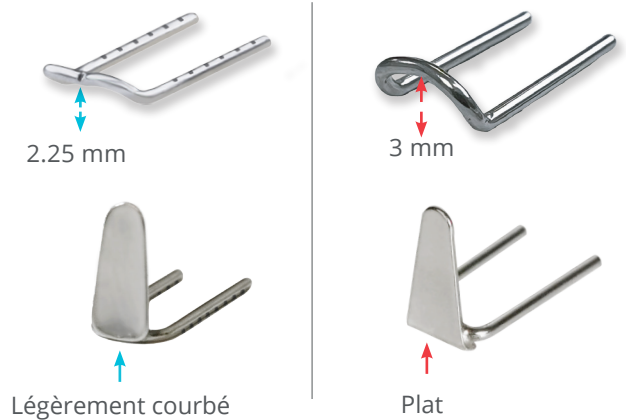

BANDE UNIVERSELLE, LA CONCEPTION À TUBE COURT RÉDUIT LES STOCKS ET PERMET DE GAGNER DU TEMPS

Les mainteneurs d'espace NuSmile offrent une solution pratique pour minimiser le déplacement des dents adjacentes après la perte prématurée de molaires temporaires.

BOUCLE SIMPLE

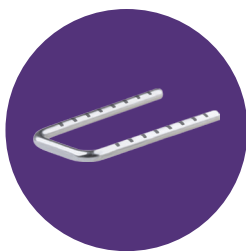

- Une option de boucle polyvalente adaptée à divers scénarios cliniques
- Les boucles métalliques en acier 316L peuvent être facilement ajustés.

BOUCLE COURBÉE




- Courbure et hauteur optimales pour réduire le glissement et le conflit avec les tissus sur les canines primaires ou permanentes
- Peut être placé distalement en direction gingivale pour guider une molaire permanente en éruption.

BOUCLE DISTALE




- Utilisé sous la gencive pour guider l'éruption d'une molaire permanente.
- Conçu avec une légère courbure suivant l'anatomie molaire proximale, réduisant l'accumulation de plaque dentaire.


MISE EN PLACE D'UN MAINTENEUR D'ESPACE

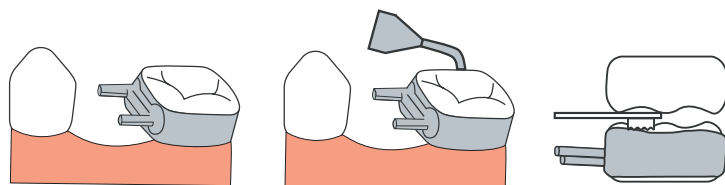


1 ESSAYAGE - Sélectionnez la taille de bande appropriée. La bande de taille appropriée doit s'ajuster parfaitement à la dent et résister au déplacement. Un poussoir et/ou un positionneur de bande peuvent être utilisés pour ajuster et adapter la bande à la dent.

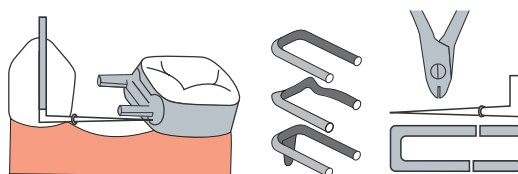

2 MESURER L'ESPACE, SÉLECTIONNER ET COUPER LES TIGES DE LA BOUCLE - Mesurez la dent extraite ou la dimension méso-distale de l'espace d'extraction et sélectionnez l'une des options de boucle métallique. À l'aide d'une pince coupante ou d'une fraise avec une turbine, coupez la longueur de la boucle métallique de manière à ce qu'elle corresponde à la largeur méso-distale de l'espace d'extraction. Coupez une extrémité de la tige légèrement plus courte que l'autre pour faciliter l'insertion dans les tubes. La tige doit s'insérer complètement dans les tubes sur une longueur de 2,5 à 3 mm (en insérant d'abord l'extrémité la plus longue).

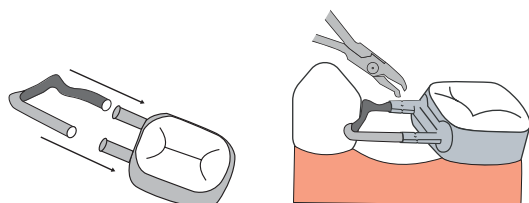

3 ASSEMBLER, AJUSTER ET SERTIR LES TUBES - Remplacez l'espaceur assemblé sur la dent et faites glisser la tige métallique à l'aide d'un instrument en plastique jusqu'à ce qu'il touche la dent pilier. La boucle doit toucher la dent juste en dessous du point de contact proximal, mais sans toucher le tissu gingival. Une fois que vous avez obtenu un ajustement correct, à l'aide d'une pince à sertir, serrez les tubes du mainteneur d'espace à 1,5 mm de l'extrémité ouverte du tube avant de le retirer de la bouche afin de vous assurer que la tige est bien verrouillée. Après l'avoir retiré de la bouche, effectuez des sertissages circonférentiels supplémentaires près de l'extrémité ouverte des deux tubes afin de vous assurer que la tige est bien fixée et qu'il n'y a pas de bords tranchants.

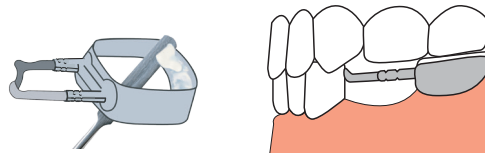


4 SCÉLÈMENT - Appliquez du ciment de scellement sur la surface interne de la bande en partant de la face gingivale. Placez la bande sur la dent à l'aide d'un poussoir et/ou d'un dispositif de mise en place. Laissez le ciment prendre, puis retirez l'excédent.

KITS ET RÉFÉRENCES DE MAINTENEUR D'ESPACE

KIT DE DÉMARRAGE


Contient 39 bandes : 18 boucles plates, 18 boucles courbées, 3 boucles distales

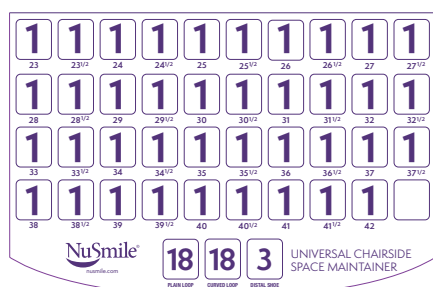

UCMSK

KIT PROFESSIONNEL

Contient 78 bandes : 36 boucles plates, 36 boucles courbées, 6 boucles distales

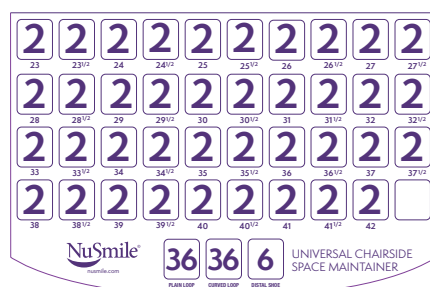


UCSMPK

RECHARGES

Sélectionner parmi

1 paquet de 2 bandes | Boucles simples, lot de 10 | Boucles courbées, lot de 10 | Boucles distales, lot de 10

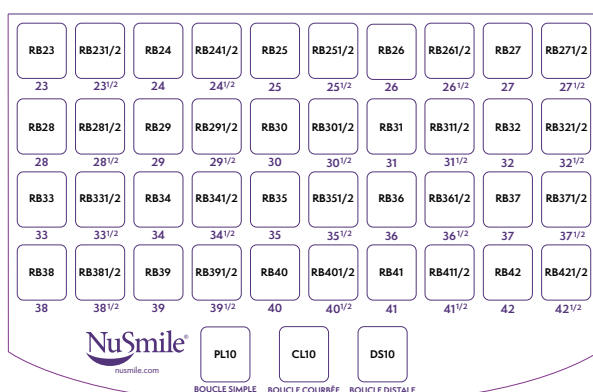


SP2059
Boîte de rangement universelle
pour mainteneurs d'espaces

BIOCÉRAMIQUE BIOACTIVE

NeoPUTTY®



TRAITEMENT DES RACINES ET DE LA PULPE

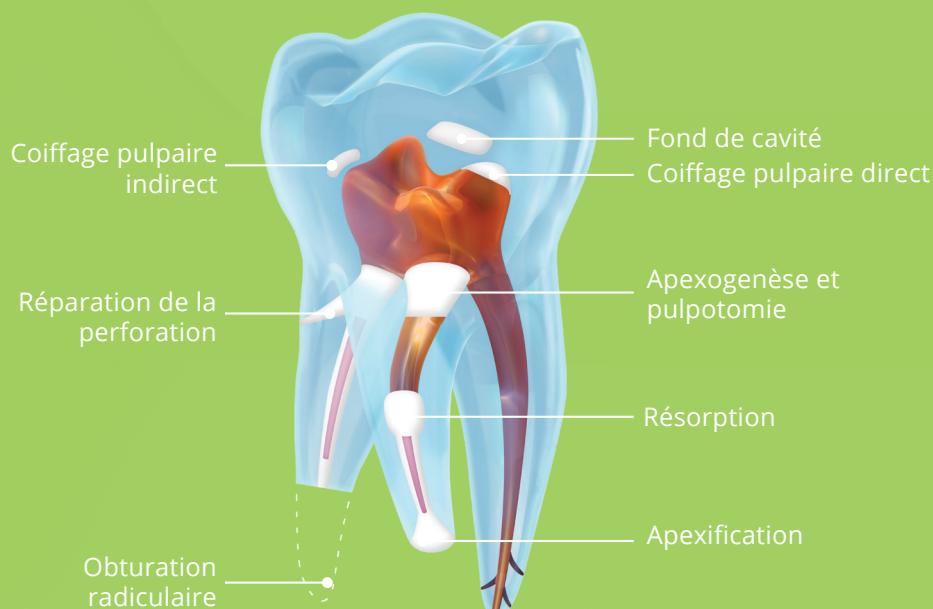

NNPIK **Kit 0,5 g**
1 seringue 0,5 g

NNPMK **Kit 1,2 g**
1 seringue 1,2 g

NNPPK **Kit 2,4 g**
2 seringues 1,2 g


NEOPUTTY EN 3 ÉTAPES FACILES

1

ISOLER / CONTRÔLER

Isolez le quadrant à traiter, à l'aide d'une digue en caoutchouc. Éliminez la carie et le toit de la chambre pulpaire. Amputer la pulpe coronaire à l'aide d'un excavateur tranchant ou d'une grande fraise ronde. Le rinçage à l'aide d'une solution saline stérile est facultatif.



Contrôlez l'hémostase en appliquant une pression pendant 1 à 2 minutes à l'aide de cotons secs ou légèrement humides. N'utilisez PAS de sulfate ferrique ou de formocrésol lors d'une pulpotomie au MTA.

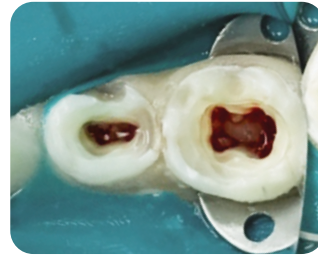

2


DISTRIBUER

Ne distribuez que la quantité de NeoPUTTY nécessaire à l'aide du guide de dosage fourni. Une fois le saignement maîtrisé, placez NeoPUTTY dans la chambre pulpaire à l'aide d'une pince Woodson, d'un condenseur ou d'une pince à coton. Une boulette de coton humide est souvent l'outil le plus facile à utiliser pour la mise en place, l'étalement et la condensation en douceur.

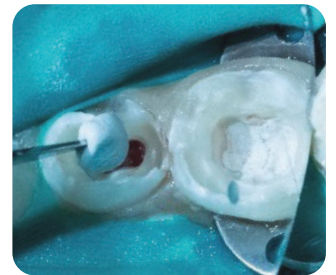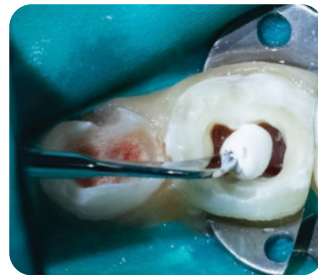

Remarque : une épaisseur de 1,5 à 2 mm suffit pour recouvrir le plancher pulpaire — ne remplissez pas toute la chambre.

Rechercher une technique de distribution zéro déchet vidéo explicative

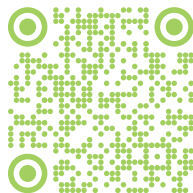

GUIDE DE DOSAGE



Pulpotomie Cervicale (antérieure/postérieure) • 1 unité
Pulpotomie de la première molaire primaire • 2 unités
Pulpotomie de la seconde molaire primaire • 2 unités
Pulpotomie molaire permanente • 4 unités


* Les mesures sont approximatives *
Épaisseur optimale ≥ 1,5 mm

3

COURONNE OU COUVERTURE

NeoPUTTY résiste au rinçage et ne nécessite aucune couverture supplémentaire. Si la dent est déjà préparée pour la pose d'une couronne, un ciment de scellement suffit. Si une préparation supplémentaire de la dent est nécessaire, recouvrez NeoPUTTY avec un fond de cavité, IRM®, Oxyde de Zinc ou un CVIMAR afin d'éviter tout déplacement dû aux projections d'air/d'eau.

Si vous placez une restauration intracoronaire, recouvrez NeoPUTTY d'un matériau polymérisable (par exemple, ACTIVA BioACTIVE Base/Liner ou Lime-Lite ou un CVIMAR) avant le mordantage, le collage et la mise en place du composite.

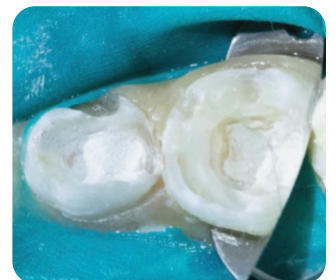

“ Le passage à NeoPUTTY a été l'un des meilleurs choix que j'ai faits dans ma pratique. Il est prémélangé, ce qui permet de gagner du temps et de réduire le gaspillage. Les pulpotomies sont plus rapides et plus faciles, et comme il ne contient ni résine ni oxyde de bismuth, j'ai obtenu d'excellents résultats cliniques sans décoloration des dents. Il est efficace, fiable et offre des résultats excellents et constants. ”

Dr. Egle Vitaite, Lituanie

TOUT CE QUE VOUS AIMEZ DANS NEOMTA,
MAIS EN MIEUX !

NeoMTA[®]
2

NMTA21.0 **Kit de 1,0 g**
Poudre 1,0 g, Gel 2,0cc

NMTA22.5 **Kit de 2,5 g**
Poudre 2,5 g, Gel 4,0cc

MTA en format économique

Conçu pour être plus facile
à mélanger : formule du gel
améliorée

Excellente maniabilité,
préparation rapide
et insoluble

Un produit pour tous les
besoins de traitement des
racines et de la pulpe

Pas de dyschromie
dentaire. Possède la plus
grande radio-opacité
de sa catégorie

Bioactif et non toxique



“ Nous devons donner aux praticiens la possibilité de
travailler comme ils l'entendent sans compromettre
la qualité de leur travail. ”

Carolyn Primus, PhD | Inventeur de White ProRoot^{®1} MTA², NeoMTA[®], NeoMTA[®] 2, NeoPUTTY[®]

¹PROROOT[®], DENTSPLY[®], et DENTSPLY SIRONA[®] sont des marques déposées de DENTSPLY SIRONA Inc.

²Breveté sous le brevet américain n° 7,892,342 détenu par DENTSPLY International Inc.

NuSmile® MTA2

MÉLANGE ET PROTOCOLE POUR LA PULPOTOMIE - MATÉRIAU EN DEUX PARTIES, POUDRE ET GEL


1



Une mesure de poudre

Petite dose - 1 dent antérieure
Grande dose - 1 dent postérieure

2

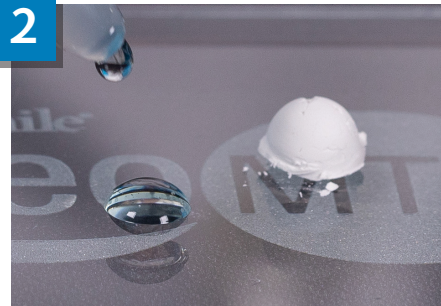

Une goutte de gel

3




Spatule flexible moyenne

verser la moitié d'une goutte
dans la poudre

4

ÉTAPE IMPORTANTE

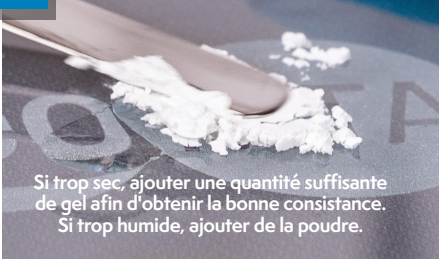

Si trop sec, ajouter une quantité suffisante
de gel afin d'obtenir la bonne consistance.
Si trop humide, ajouter de la poudre.

Intégrer en profondeur

ajouter progressivement du gel pour obtenir
la consistance souhaitée

5



Si vous ne l'utilisez pas immédiatement,
couvrez-le d'un papier ou d'une gaze en
coton humide pour retarder la prise.

Mélange optimal

Consistance équivalente
à un mastic

6



Placer délicatement NeoMTA2

en substitution de la pulpe à l'aide d'un
instrument approprié

7



Utiliser un coton légèrement humide, un
brunissoir ou un autre instrument approprié.

Étaler NeoMTA2

recouvrir entièrement le plancher de la
chambre pulpaire d'une épaisseur > 1,5 mm

8



Terminer la restauration immédiatement



TUTORIEL VIDÉO

Mélange et pulpotomie avec le MTA

NeoMTA 2 est immédiatement insoluble lorsqu'il est mis en place. Vous pouvez restaurer directement sur NeoMTA 2 avec n'importe quel matériau approprié (il n'est PAS nécessaire d'attendre la prise de NeoMTA 2). Vous pouvez aussi utiliser, au choix : CVI, CVIMAR, ACTIVA BioACTIVE ou tout autre matériau approprié pour couvrir NeoMTA 2 pour la restauration définitive de la dent.

NuSmile®

NuNamel™ *SDF*

38% de fluorure diamine d'argent

NEW

VOTRE SOLUTION CONTRE L'HYPERSENSIBILITÉ

AUCUN FRAISAGE
NI ANESTHÉSIE REQUIS

GAIN DE TEMPS

SOULAGE
L'HYPERSENSIBILITÉ
DENTINAIRE

ABORDABLE

INDOLORE, EFFICACE
ET FACILE À UTILISER



AVANTAGES ANTIMICROBIENS
ET DE REMINÉRALISATION


QU'EST-CE QUE LE SDF ?

Le fluorure d'argent diamine (SDF) à 38 % est une solution efficace pour le traitement de l'hypersensibilité dentaire. Il agit en obstruant les tubules dentinaires, ce qui contribue à minimiser la sensibilité. L'argent a des propriétés antimicrobiennes tandis que le fluor favorise la reminéralisation.

Le SDF est appliqué localement sur les dents, souvent à l'aide d'un petit pinceau ou d'un applicateur. Il peut être particulièrement utile dans les situations où les traitements dentaires traditionnels (tels que les obturations ou les scellants) ne sont pas envisageables, notamment chez les patients ayant des besoins particuliers qui ont des difficultés à recevoir des soins dentaires traditionnels.


NuNamel SDF ne tache pas l'émail ou la dentine sains. Cependant, il peut assombrir les zones cariées, car l'argent interagit avec les lésions infectées. Les patients doivent être informés de cette possibilité avant le traitement.

COMMENT APPLIQUER LE SDF

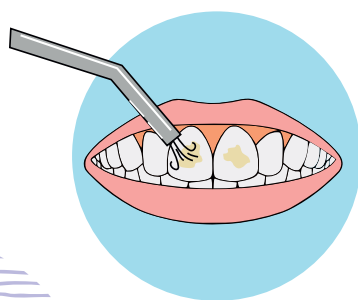

ÉTAPE 1

Enlevez les résidus alimentaires, isolez et séchez la zone à traiter.

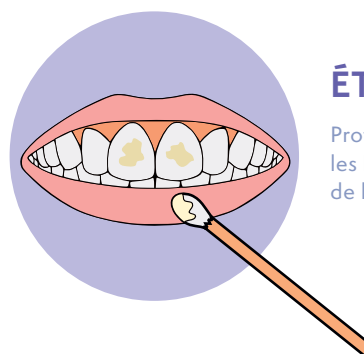


ÉTAPE 2

Protégez la gencive et les lèvres en appliquant de la vaseline.




ÉTAPE 3

Versez 1 à 2 gouttes de NuSmile NuNamel SDF dans un godet et appliquez à l'aide d'un micro-pinceau.

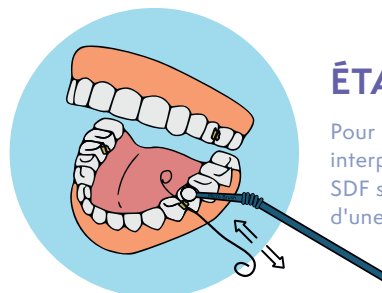


ÉTAPE 4

Pour une application interproximale, appliquez le SDF sur le fil dentaire à l'aide d'une micro-brosse.

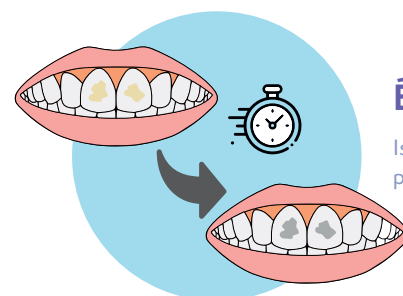

ÉTAPE 5

Isolez la zone traitée pendant 1 minute.

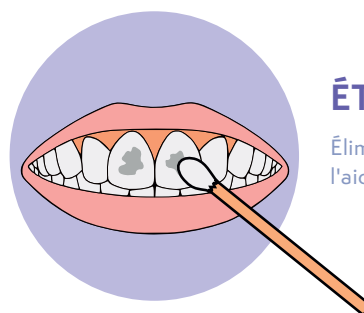

ÉTAPE 6

Éliminez l'excès de SDF à l'aide d'un coton.

NSSDF

NuNamel SDF
flacon de 4 ml

FORMATIONS

MASTERCLASS DE RESTAURATION EN ODONTOLOGIE PÉDIATRIQUE

La session théorique offre une compréhension approfondie des processus biologiques et un état des connaissances actuelles basé sur la littérature scientifique.

Les ateliers pratiques permettront aux participants d'acquérir une maîtrise complète de chaque étape de la préparation à la pose de couronnes pédiatriques préformées esthétiques.

Notre objectif est de vous donner les clefs pour pouvoir intégrer sereinement ces solutions thérapeutiques dans votre pratique quotidienne.

Cette formation permet de découvrir :

- Les indications des thérapeutiques pulpaire des dents temporaires et permanentes vitales
- La présentation et les indications des couronnes pédiatriques préformées : Zircon, Acier et BioFlx®
- La présentation des biocéramiques actives NuSmile NeoPUTTY®
- La présentation et les indications des mainteneurs d'espace

Intérêts de la formation :

- Formation tournée vers la clinique
- Équipements fournis
- Travaux pratiques encadrés par nos formateurs

Découvrez toutes nos dates
nusmile.fr/formations





Si vous avez une question ou voulez en savoir plus sur les produits Nusmile, visitez notre site internet **NUSMILE.FR**



NuSmile

3315 W 12th St,
Houston, TX 77008,
États-Unis
+1 713-861-0033



Opsyse

18 Allée du Fenouil - ZA St Louis
84250 LE THOR - France
contact@nusmile.fr
04 42 04 32 68